



HAND WASH



HANG DRY



DO NOT MACHINE WASH



DO NOT TUMBLE DRY



DO NOT IRON



Ossatec Benelux B.V.

P.O. Box 572 - 5400 AN UDEN
Neutronenlaan 54 - 5405 NH UDEN

T. +31 (0) 413 - 26 52 81
F. +31 (0) 413 - 25 58 40
E. info@ossatec.eu
I. www.ossatec.eu

OSSA DE LUX



Instructies Ossa de Lux


Instructions Ossa de Lux

Instruktion zur Ossa de Lux

Instructions Ossa de Lux

Instrucciones Ossa de Lux

Istruzioni Ossa de Lux

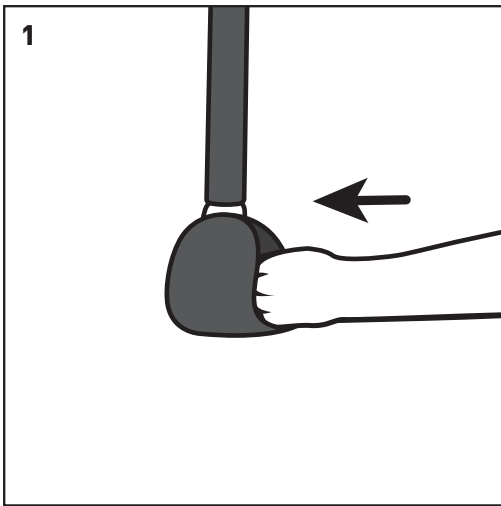

NL Ossa de Lux - Gebruiksaanwijzing

Schuif uw hand in de handhouder. Zorg ervoor dat uw polsgewricht in het midden van de houder ligt.

EN Ossa de Lux - User manual

Slide your hand into the hand holder. Make sure that your wrist joint is placed in the middle of the holder.

DE Ossa de Lux - Gebrauchsanweisung

Schieben Sie Ihre Hand in die Handhalterung. Achten Sie darauf, dass Ihr Handgelenk in der Mitte der Halterung liegt.

FR Ossa de Lux - Instructions pour l'utilisation


Glissez votre main dans le support pour la main. Veillez à ce que votre articulation de poignet se trouve au milieu du support.

ESP Ossa de Lux - Instrucciones de uso

Deslice su mano en el soporte de mano. Asegúrese de que la muñeca se sitúa en el centro del soporte.

IT Ossa de Lux - Istruzioni per l'uso

Inserire la mano nell'apposito supporto. Assicurarsi che il polso si trovi al centro del supporto.

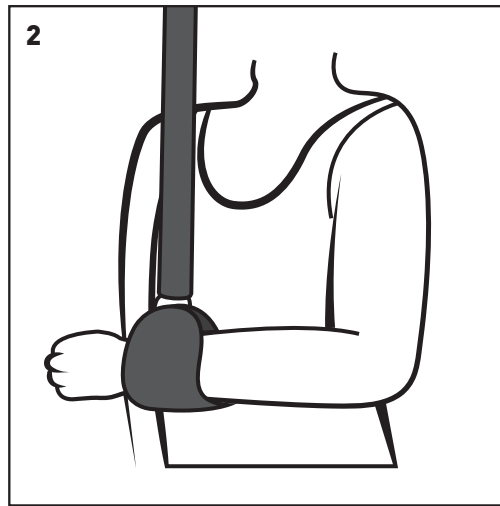

Leg de sling over uw gezonde schouder naar achteren.


Move the sling backwards over your healthy shoulder.

Führen Sie die Schlinge über die gesunde Schulter nach hinten.

Posez le sling sur votre épaule saine et placez-le vers l'arrière.

Lleve la tira hacia atrás por encima de su hombro sano.

Portare la fascia dietro la schiena facendola passare sopra la spalla sana.

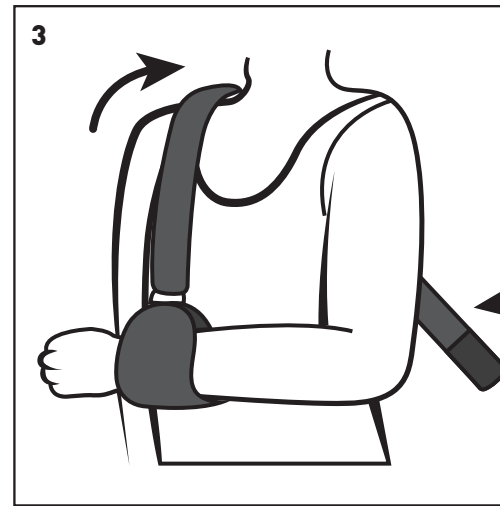

Breng de sling via de onderarm van uw gekwetste arm terug naar voren.


Bring the sling back to the front over the lower part of your injured arm.

Führen Sie die Schlinge über den Unterarm des verletzten Arms wieder nach vorne.

Ramenez le sling par l'avant-bras de votre bras blessé vers l'avant.

Traiga la tira otra vez hacia adelante por el antebrazo de su brazo lesionado.

Riportare la fascia sul davanti facendola passare sotto l'avambraccio del braccio infortunato.

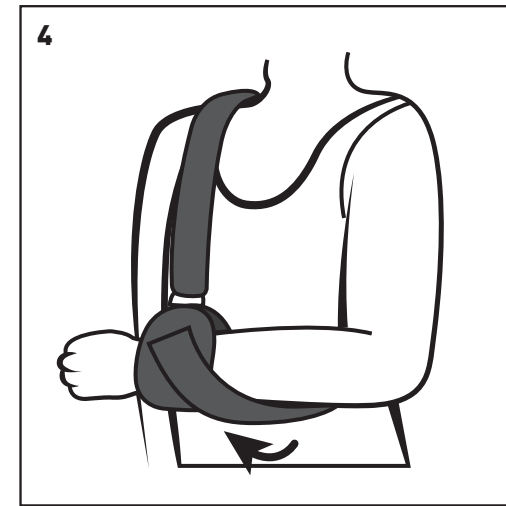

Bevestig de sling aan de handhouder met het klittenband. De gekwetste arm hangt nu vrij, terwijl uw pols ondersteund wordt. Wilt u de arm steviger fixeren? Dan adviseren wij u onze Hanging sling.

Attach the sling to the hand holder with the Velcro. The injured arm is now hanging free, while your wrist is being supported. If you want to hold your arm in place more firmly, we recommend that you use our Hanging Sling.

Befestigen Sie die Schlinge mit dem Klettband an der Handhalterung. Der verletzte Arm hängt jetzt frei, während das Handgelenk unterstützt wird. Sie möchten den Arm fester fixieren? Dann empfehlen wir Ihnen unseren Hanging Sling.

Fixez le sling au support pour la main avec la bande velcro. Le bras blessé est maintenant libre alors que votre poignet est soutenu. Vous souhaitez mieux fixer le bras ? Dans ce cas, nous vous conseillons notre Hanging sling.

Sujete la tira al soporte de mano con la cinta de velcro. Ahora su brazo lesionado cuelga libremente, mientras que su muñeca está apoyada. ¿Desea fijar el brazo de forma más firme? Entonces le recomendamos nuestro Hanging sling.

Fissare la fascia al supporto per la mano mediante la fascetta in velcro. In questo modo il braccio infortunato è libero mentre il polso viene sostenuto. Per l'eventuale immobilizzazione del braccio consigliamo l'uso del nostro Hanging sling.

